

ZOLL AED 3® Trainer

AED-koulutuslaite ja lisävarusteet



Täydellinen ZOLL AED 3 -simulaatio ja reaaliaikainen elvytyspalaute (Real CPR Help)

ZOLL AED 3® Trainer on ainoa koulutuskäyttöön tarkoitettu automaattinen ulkoinen defibrillaattori (AED-laite), jonka Real CPR Help® antaa reaaliaikaista palautetta harjoittelijan tekemän elvytyspainelun laadusta. Harjoittelun avulla opiskelijat oppivat oikean painelutaaajuuden ja -syvyyden.

ZOLL AED 3 Trainer on suunniteltu muistuttamaan mahdollisimman paljon kliinistä AED-laitetta, minkä ansiosta opiskelijoiden pelastuskokemukset ovat realistisempia. ZOLL AED 3 Trainer -koulutuslaite sisältää:

- Aktiivisen LCD-näytön, jonka kokovärikuvat peilaavat opiskelijoille kliinisen ZOLL AED 3 -laitteen toimintaa
- Harjoituselektrodien kontaktianturit, jotka aistivat elektrodin kontaktin elvytysnukkeen – ei tarvetta erilliselle pelastussimulaatiota tukevalle kaukosäätimelle
- Laitteeseen integroidun keskeytyspainikkeen, jonka ansiosta ohjaaja voi keskeyttää harjoitustilanteen
- Pitkäkestoiset kulutusosat, säästävät aikaa ja rahaa
- Helppokäyttöiset USB-ohjelmistopäivitykset/kielivalinnan konfiguroinnin

2015 AHA- ja ERC-suositusten mukainen

Helppo konfigurointi: Kaikki tarvittavat konfiguroinnit ja harjoitustilanteiden hallinta tehdään koulutuslaitteella.

Konfiguroitavia vaihtoehtoja ovat:

- Harjoitustilanne
- Käytettävä tila (puoli- tai täysautomaattinen)
- Ohjeet amatööripelastajalle
- Ohjeet hengityksen tarkastamiseen
- Ohjeiden äänenvoimakkuus
- Kieli (vaihtelee tilatun osan mukaan)


ZOLL AED 3 Trainer sisältää kaiken, mitä koulutukseen tarvitaan:

- ZOLL AED 3 Trainer -koulutuslaite
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz® -harjoituselektrodit (vähintään 100 harjoituskertaa varten)
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz -harjoituselektrodien geelit/suojus (vähintään 50 harjoituskertaa varten)
- Neljä (4) D-paristoa
- Käyttöohje


ZOLL®



Reaaliaikainen elvytyspalaute ja suuri 2-värinen painallussyvyyden indikaattori

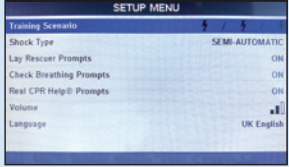

Konfiguroi laitteen toimintaa ja pelastustilanteita suoraan laitteelta

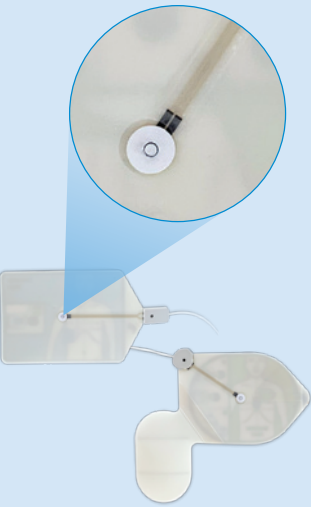

Elektrodianturit tunnistavat kontaktin elvytysnukkeen, erillistä kaukosäädintä ei tarvita

ZOLL AED 3 Trainer -koulutuslaitteen tekniset tiedot

Koko: (S x L x K) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm

Paino: 3 lbs 15oz. (1,8 kg) paristojen kanssa

Virta: Neljä (4) D-paristoa (sisältyvät toimitukseen) AED-koulutuslaitetta varten (riittävät yli 16 harjoitustuntiin)


Pelastustilanteet

Kouluttaja voi valita erilaisia pelastustilanteita suoraan laitteelta soft key -painikkeiden avulla.



ZOLL AED 3 Trainer -koulutuslaitteen lisävarusteet

Korvaavat osat on tilattava erikseen.

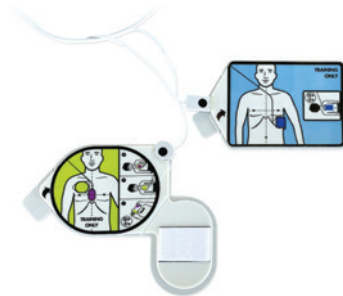

Trainer CPR Uni-padz®
-harjoituselektrodien kiinnitysgeelit
Part# 8028-000012
(pakkauksessa 5 kpl)



Trainer CPR Uni-padz
-harjoituselektrodien suojuus
Part# 8028-000013



Elvytysnukke
Part# 8000-0835-01



Ohjelmiston USB-päivityssarja
Part # 8028-000011-XX



CPR Uni-padz -harjoituselektrodit
Part# 8028-000010

ZOLL Medical Corporation Worldwide Headquarters

269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, Yhdysvallat
978-421-9655
800-804-4356

Katso tytäryhtiöiden yhteystiedot sekä muut maailmanlaajuiset sijainnit verkko-osoitteesta www.zoll.com/contacts
www.zoll.com/contacts.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Real CPR Help, Uni-Padz, ZOLL ja ZOLL AED 3 ovat ZOLL Medical Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta. *ZOLL AED 3 -defibrillaattori ei ole myynnissä Yhdysvalloissa.

Painettu Yhdysvalloissa. MCN PP 1902 0365-21

ZOLL